

Melgisorb® Plus

Imukykyinen alginaattisidos

Melgisorb Plus on erittäin imukykyinen sidos, joka soveltuu erilaisille kohtalaisesti ja runsaasti erittäville haavatyypeille.




Hydrofiiliset alginaattikuidut


Pehmeä ja steriili alginaattikuiduista tehty sidos.

- Erinomainen imukyky runsaasti erittäville haavoille
- Korkea vetolujuus märkänä, mahdollistaa sidoksen helpon ja turvallisen poiston
- Hyvä pidätyskyky vähentää maseraation riskiä

Kuinka käyttää Melgisorb® Plus sidosta

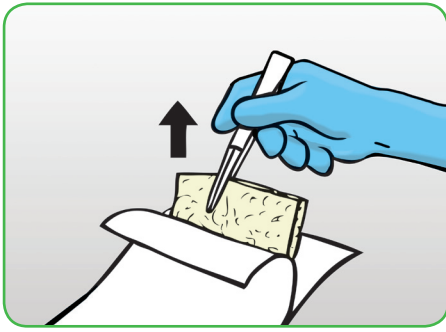


1. Valitse Melgisorb Plus sidos, joka on hieman suurempi kuin haava. Vedä pakkaus auki.

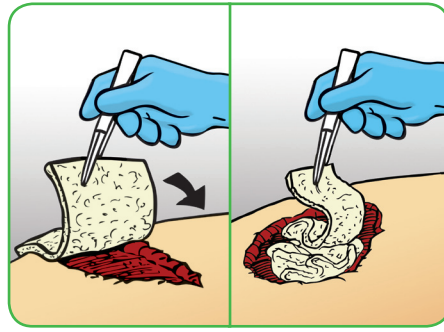

2. Aseta kuiva Melgisorb Plus sidos kosteaan haavapintaan

Pinnalliset haavat: Valitse oikea sidoskoko, joka peittää koko haava-alueen.

Syvät haavat ja onkalot: Leikkaa oikea pituus Melgisorb Plus nauhasta ja täytä haava sidoksella väljästi.

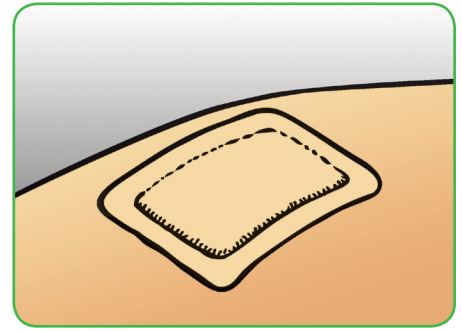

3. Peitä Melgisorb Plus sopivalla sidoksella kuten esim. Meplix® Border.

Melgisorb Plus sidosta voidaan käyttää yhdessä kompression kanssa.

Kuinka Melgisorb Plus toimii

Melgisorb Plus imee suuria määriä eritettä. Kun sidos joutuu kosketuksiin eritteen kanssa alginaattikuidut geeliytyvät pehmeäksi ja kosteaksi geeliksi mahdollistaen haavalle optimaalisen paranemisympäristön. Geeliytynyt sidos on vaivatonta poistaa huuhtelemalla 0.9% keittosuolaliuoksella.

Melgisorb Plus sidoksen edut

- Erittäin imukykyinen
- Ei tartu geeliytyneenä haavan pintaan
- Sopii onkalohaavoille
- Geeliytyy joutuessaan kontaktiin joko haavaeritteen tai natriumioneita sisältävien nesteiden kanssa (esim. keittosuolaliuos)
- Pehmeä/ taipuisa/ muotoutuva
- Voidaan leikata haluttuun muotoon ja kokoon
- Alhainen ihoärsytyksen ja allergian riski
- Alginaattisidos joka ei sisällä vaikuttavia aineita, luonnonkumia, hartsia tai hartsijohdannaisia

Huomioitavaa

Melgisorb Plus ei ole tarkoitettu kuiville haavoille, III asteen palovammoille tai kirurgisiin implanteihin.

Jos epäilet infektiota, toimi paikallisten terveydenhuollon ammattilaisten asettamien ohjeiden mukaisesti

Jos tuotetta käytetään uudelleen sidoksen suorituskyky voi heikentyä ja ristikontaminaatiota esiintyä.

Käyttöalueet

Melgisorb Plus soveltuu käytettäväksi useille infektoituneille tai ei infektoituneille kohtalaisesti ja runsaasti erittävälle haavatyypille kuten:

- Painehaavat
- Laskimo ja valtimoperäiset haavat
- Diabeetikon haavat
- Ihonottokohdat
- Kirurgiset haavat
- Traumaattiset haavat

Valikoimasta löytyy tuotteita sekä pinnallisille että onkalohaavoille.

Melgisorb Plus (Steriilisti yksittäispakattu)

Tuotenro.	Koko cm	Kpl/osasto pakk.	Kpl/kuljetus pakk.
252000	5x5	10	100
252200	10x10	10	100
252500	10x20	10	100
253500	3x45	5	50



Lisätietoja osoitteesta: www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3 krs, 00380 Helsinki
Puh +358 (0) 201 622 300

Mölnlycke Health Care, Melgisorb® ja Mepilex® Border nimet ja logot ovat Mölnlycke Health Caren rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2013 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään.


Mölnlycke®