

BARRIER® leikkaustakki Universal

Ilmaa läpäisevä materiaali tarjoaa lisämukavuutta



Ergonomiset hihat mahdollistavat työskentelymukavuuden ja liikkumisvapauden

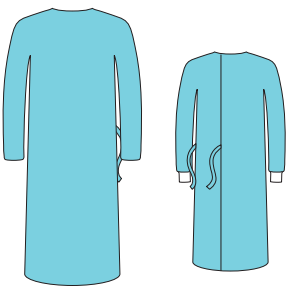


Hihojen resorit ovat yhteensopivat Biogel® -käsineiden kanssa estäen käsiä liukumasta



Käytännölliset suuret koot sopivat kaikille

- Käytännölliset suuret koot sopivat kaikille
- Ergonomiset hihat mahdollistavat työskentelymukavuuden ja liikkumisvapauden
- Saatavilla standarditason ja korkean suorituskyvyn leikkaustakkeina¹
- Käsitelty materiaali lisää alhaisen pintajännityksen omaavien nesteiden (veri) hylkimistä
- Ilmaa läpäisevä materiaali tarjoaa lisämukavuutta
- Hihojen resorit ovat yhteensopivat Biogel® -käsineiden kanssa estäen käsiä liukumasta
- Taiteltu aseptisen pukemisen mahdollistamiseksi

Standard performance	Tuotenro.	Tuotteen kuvaus	Koko	Pituus	Leveys	Pakkaus
	93000620	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	M	119 cm	140 cm	-/30
	93000621	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L	125 cm	152 cm	-/26
	93000622	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	LL	140 cm	152 cm	-/26
	93000623	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL	135 cm	164 cm	-/26
	93000624	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL-L	151 cm	164 cm	-/24
	93000625	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-L	160 cm	176 cm	-/22

Universal -leikkaustakki on saatavana myös osana Mölnlycke® asiakasrätälöityä pakkausta

High performance	Tuotenro.	Tuotteen kuvaus	Koko	Pituus	Leveys	Pakkaus
	93000720	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	M	119 cm	140 cm	-/28
	93000721	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	L	125 cm	152 cm	-/24
	93000722	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	LL	140 cm	152 cm	-/24
	93000723	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL	135 cm	164 cm	-/24
	93000724	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XL-L	151 cm	164 cm	-/22
	93000725	Universal leikkaustakki, kaksi käsipyyhettä, kääritty	XXL-L	160 cm	176 cm	-/20

Universal -leikkaustakki on saatavana myös osana Mölnlycke® asiakasrätälöityä pakkausta

- Lämpisemättömät etu- ja hihavahvikkeet minimoivat roiskeiden läpimenon vaaran
- Ultraäänisaumatut hihat lisäävät hylkivyyttä
- Etuvahvike on hengittävä



Takin materiaalit

Vartalo-osa ja hihat:
Polypropeenikuitukangas.
Etuvahvike: Polypropyleeni-
kuitukangas/ polyetyleenikalvo
Hihavahvikkeet: Polypropyleeni-
kuitukangas/ polyetyleenikalvo

Tuotteen luokitus

Standard performance takit:
European Standard EN 13795
Standard performance ja
ANSI/AAMI PB70 level 3.
High performance takit: European
Standard EN 13795 High
Performance ja ANSI/AAMI
PB70 level 3^{1,2}.

Pakkaus

Kahden kerroksen
pakkausjärjestelmä, muovinen
suojapussi ja kuljetuslaatikko,
auttavat vähentämään tuotteen
kontaminoitumisen ja vaurioitumisen
riskiä kuljetuksen ja varastoinnin
aikana

Ympäristö

Me Mölnlyckellä olemme jo pitkään
sitoutuneet minimoimaan
toimintamme ympäristövaikutukset
vaarantamatta tuotteidemme ja
palveluidemme tehokkuutta ja
luotettavuutta. Ympäristönsuojelu on
tuotantomme ja toimipisteidemme
prioriteetteja kaikkialla maailmassa.

Lähteet: 1. European Standard EN 13795: Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
2. ANSI/AAMI PB70: Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.
Mölnlycke, Biogel ja BARRIER tavaramerkit, nimet ja logotyypit on on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1052004

